

Remote Learning

Screen-Mirroring: Anbindung, Spiegelung, Datenerfassung

Anbindung zu weiteren Endgeräten: 3 Möglichkeiten

WLAN-Verbindung



direkte LAN-Anbindung



Integration in kundeneigenes Netzwerk




Touchscreen mit integrierter SPS

interner Speicher oder USB-Stick für Messwerte

im Versuchsgerät integrierter WLAN-Router

GUNT-Gerät mit integriertem WLAN-Router


Spiegelung der Bedienoberfläche

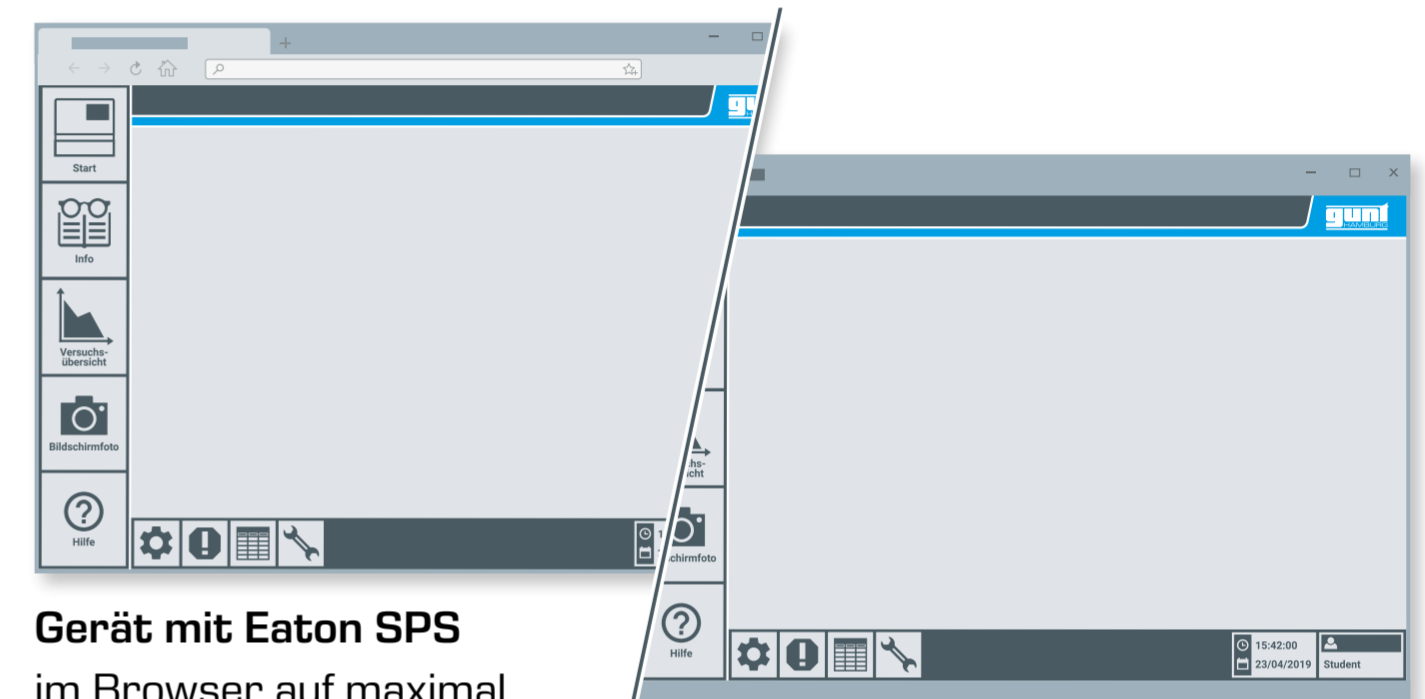

Gerät mit Eaton SPS im Browser auf maximal 5 weiteren Endgeräte

Gerät mit Weintek SPS über installierten cMT-Viewer auf maximal 10 weiteren Endgeräten

Messdaten übertragen

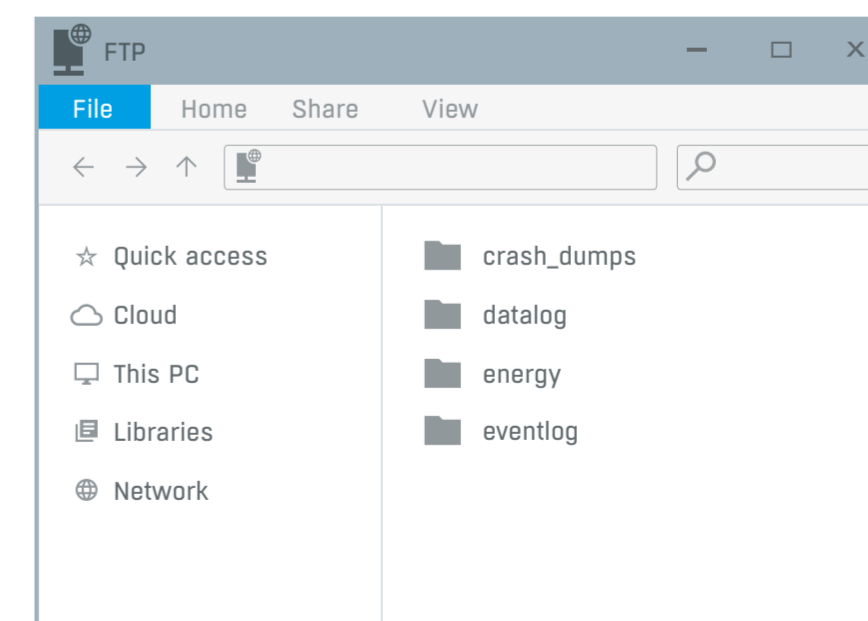

mit der IP-Adresse des Versuchsgerätes kann mittels FTP-Server auf Messdatensätze zugegriffen werden, die während des Versuches intern oder über USB-Stick gespeichert wurden